



EAR WaxVaccum

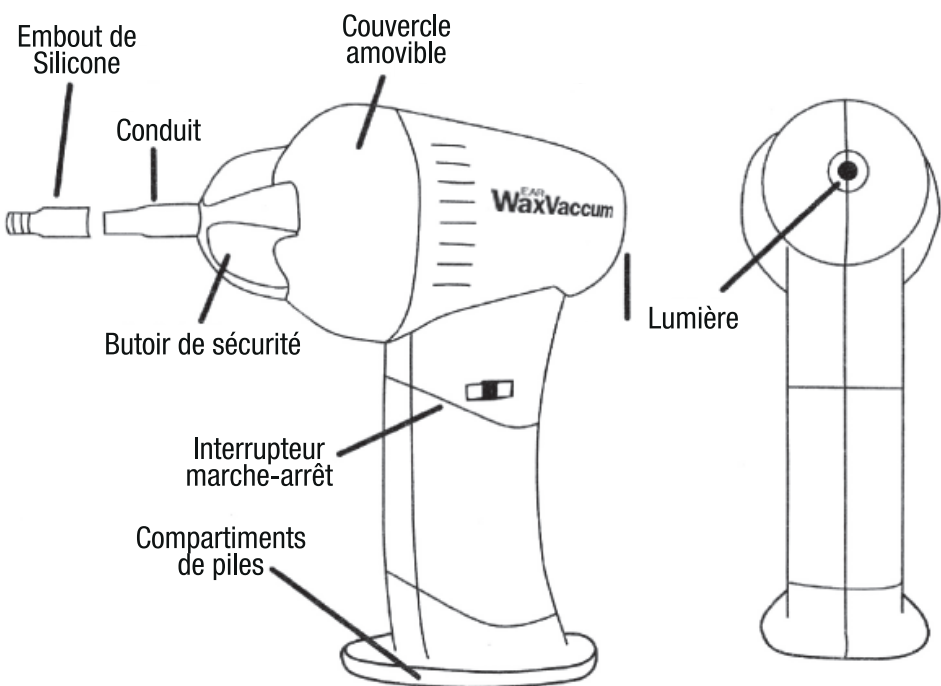

Comment installer les piles

Pour ouvrir le compartiment de piles, retirer le couvercle sous la poignée et presser sur le fermoir.

Insérer les deux piles alcalines AA tel qu'indiqué sur le couvercle du compartiment, puis refermez le couvercle. Utiliser seulement des piles alcalines et respecter la polarité. Ne pas combiner des piles usagées avec des piles neuves ou avec différents types de piles. Ne pas laisser les piles dans l'appareil pour une durée prolongée.

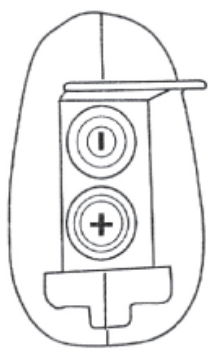

Lisez attentivement et conservez ce mode d'emploi. N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE CONFORMÉMENT AU MODE D'EMPLOI.

MISE EN GARDE : CECI N'EST PAS UN JOUET. Contient de petites pièces. Gardez hors de la portée des enfants. Lire attentivement tous les avertissements en dessous de l'emballage.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas si vous avez ou pensez avoir une rupture du tympan. En cas de douleur, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT : Le nettoyage auriculaire ne devrait causer aucune douleur. En cas de douleur dans l'oreille ou de vertiges durant le nettoyage, cessez immédiatement et contactez un médecin.

Consignes de sécurité importantes

1. Si vous constatez quoi que ce soit qui ne semble pas normal durant l'utilisation, cessez immédiatement.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, avec, ou à proximité des enfants et des personnes handicapées.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
4. Ne faites jamais fonctionner l'appareil *Ear WaxVaccum* dans une véhicule en mouvement.
5. Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
6. Ne jamais utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
7. Évitez que des objets puissent pénétrer dans les ouvertures de l'appareil.
8. Ne pas placer cet appareil où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.

Mode d'emploi

1. Fixer un embout de silicone propre en appuyant fermement l'embout sur le conduit de l'appareil. Voir à ne pas endommager l'embout de silicone lors de l'insertion.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre en position marche.
3. Insérer dans l'oreille. Ne pas insérer l'embout de plus de 3 mm dans le conduit auditif. Limitez-vous à enlever l'humidité et les particules de saleté situés sur la zone visible de l'extérieur du conduit auditif.

REMARQUE : Si un sifflement aigu se fait entendre, retirer l'embout de silicone et remplacer-le.

Gardez une tasse d'eau chaude à proximité au cas où le conduit se boucherait. Puiser de l'eau chaude dans le *Ear WaxVaccum*, peut aider à éliminer l'obstruction. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

4. Répétez les étapes jusqu'à ce que la majorité de l'humidité et les particules de saleté aient été retirés. Notez que le processus prend généralement de 30 secondes à 5 minutes. Si le processus prend plus de temps, s'il vous plaît consulter un médecin.
5. Une fois l'opération terminée, retirer l'embout de silicone du conduit et nettoyer l'appareil selon les instructions de nettoyage et d'entretien.

FABRIQUÉ EN CHINE

Distribué par :

AUDIOLOGIX
HEARING WELLNESS • BIEN-ÊTRE AUDITIF

Instructions de nettoyage et d'entretien

Après chaque utilisation, nettoyer l'appareil *Ear WaxVaccum* selon les instructions suivantes :

1. Tirez pour retirer l'embout de silicone. Désinfectez entre chaque utilisation en immergeant les embouts dans de l'alcool isopropylique (alcool à friction) et les laisser sécher à l'air, ou en les plongeant dans l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des liquides chauds.
2. Tourner et tirer le butoir de sécurité pour l'oreille et le couvercle amovible contre le sens des aiguilles pour enlever le couvercle. **REMARQUE :** La première fois, le joint sur le couvercle amovible peut être serré.
3. Assurez-vous que le compartiment à piles est bien fermé avant de nettoyer la section principale de l'appareil. Essuyez l'eau et la saleté de l'intérieur du couvercle amovible avec un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau et de savon.



4. Ne pas immerger l'appareil *Ear WaxVaccum* dans l'eau. Rincer uniquement les pièces amovibles l'eau chaude du robinet pour éliminer tout résidu de savon ou de désinfectant sur les pièces.

5. (Facultatif) Pour désinfecter davantage l'appareil, essuyer les pièces avec une serviette en papier imbibée d'alcool isopropylique (alcool à friction) et laissez sécher à l'air.

6. Nettoyer le filtre avec la brosse de nettoyage.
7. Replacer le couvercle amovible et le butoir de sécurité en place.
8. Ne pas laisser les piles dans l'appareil pour une durée prolongée.

